

feverline®

Sistema de Monitoreo de Temperatura

feverline®


Indicadores de temperatura de frente, tanto para el hospital como para el hogar



DISPLAY CONTINUO

Rápido y simple
monitoreo de temperatura
basado en tecnología de
cambio de color

- Monitoreo de la tendencia de la temperatura
- Chequeo de la Hipo/Hipertermia
- Vigilancia Pre y Post operatoria
- Para uso Hospitalario y Hogareño
- Reusable o Descartable
- Libre de Látex
- Temperatura central ajustada

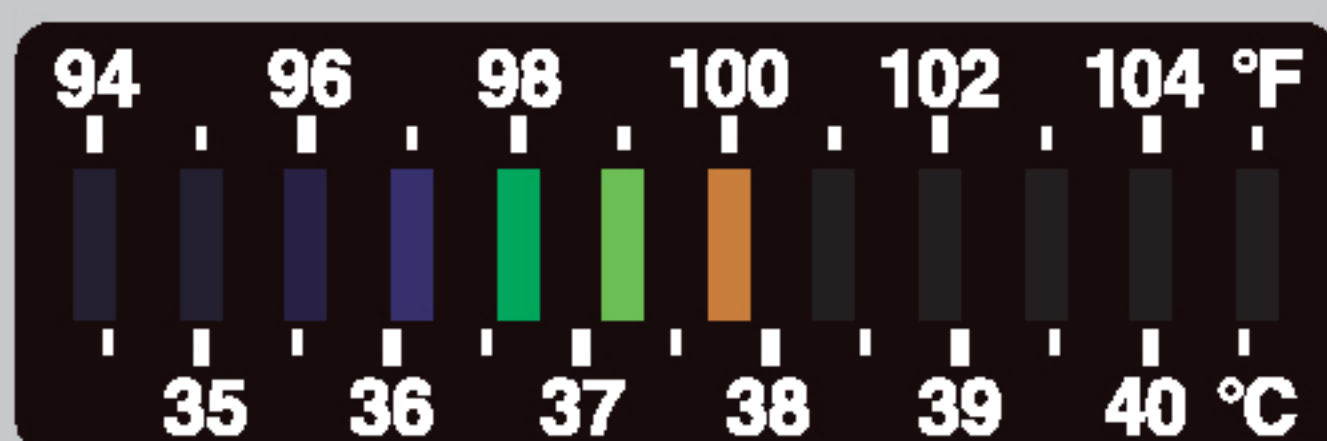

Actual Size

CE 0434

Conforms to ISO 13485 2003E

Los cristales líquidos son compuestos químicos y mezclas que exhiben las propiedades mecánicas de los líquidos y las características ópticas de los sólidos.

Los cristales líquidos que cambian de color con los cambios de temperatura se conocen como cristales líquidos termocrómicos (CLT). Científicamente se identifican como cristales líquidos colestéricos. La microencapsulación es el proceso que principalmente protege, estabiliza y hace que el líquido sea más fácil de usar.


Los productos Feverline utilizan esta tecnología emocionante (CLT) para medir las tendencias de temperatura clínica en el entorno sanitario.

Los termómetros Feverline se componen de una serie de eventos de temperatura discretos, cada evento muestra un color verde a medida que se alcanza la temperatura indicada.

El color cambia de tostado a verde a azul a medida que aumenta la temperatura. Las referencias están disponibles bajo petición.

REUTILIZABLE

Hospital / Casa	
Código Producto:	L12LCRHZ035C01
Descripción:	12 Eventos, Termómetro Reusable, no adhesivo
Tamaño:	95mm x 19mm
Escala:	°C
Rango:	35 to 40°C
Presentación:	Individual; en bolsas de 100; en planchas de miles

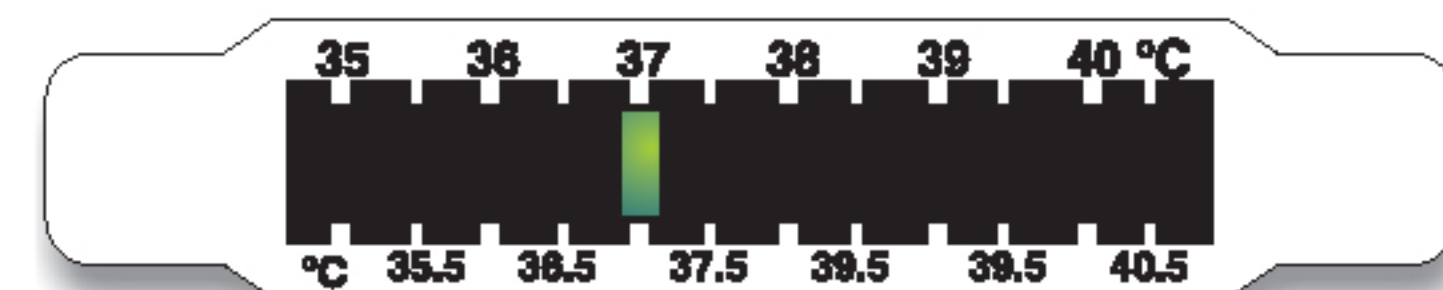


Casa	
Código Producto:	L06LCRHZ035D02
Descripción:	6 Eventos, Termómetro Reusable, no adhesivo
Tamaño:	89mm x 19mm
Escala:	°C
Rango:	35 to 40°C
Presentación:	Individual; en bolsas de 100; en planchas de miles



DESCARTABLE

Hospital	
Código Producto:	L12LCRHZ035D01
Descripción:	12 Eventos, Termómetro Descartable, adhesivo
Tamaño:	58mm x 20mm
Escala:	°C y °F
Rango:	35 to 40°C
Presentación:	Individual; en bolsas de 100; en planchas de miles

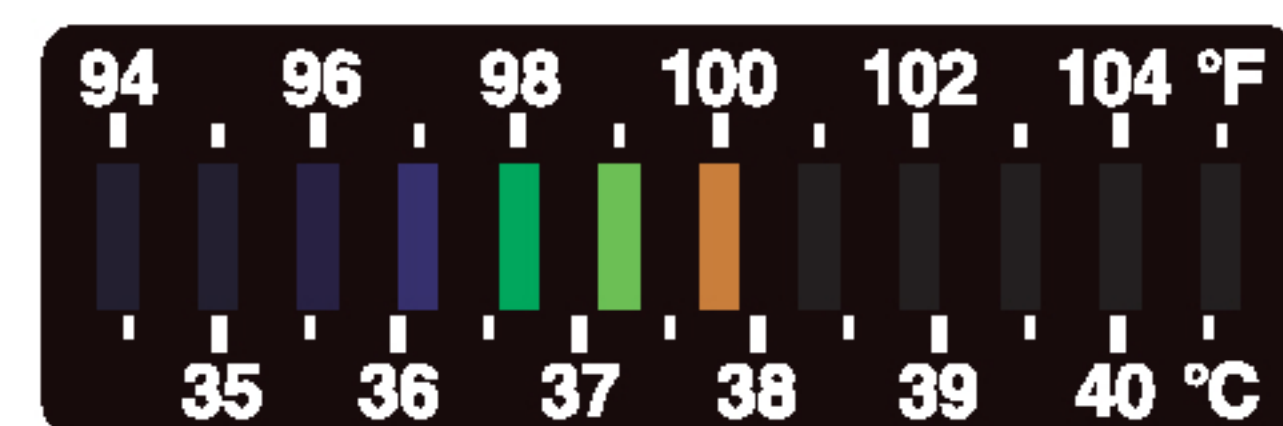

Hospital	
Código Producto:	L06LCRHZ035C01
Descripción:	6 Eventos, Termómetro Descartable, adhesivo
Tamaño:	46mm x 11mm
Escala:	°C
Rango:	35 to 40°C
Presentación:	Individual; en bolsas de 100; en planchas de miles



TMCHallcrest

Oficinas Centrales:
Tasso 2695, (1427), CABA, Argentina
Tel.: +54 - 11 - 4523 2981
E-Mail: info@tmchallcrest-latam.com
Web: www.tmchallcrest.com.ar